


PRODUCT SPECIFICATION GUIDE

产品规格书

耳背式助听器

BTE Hearing aids

5118

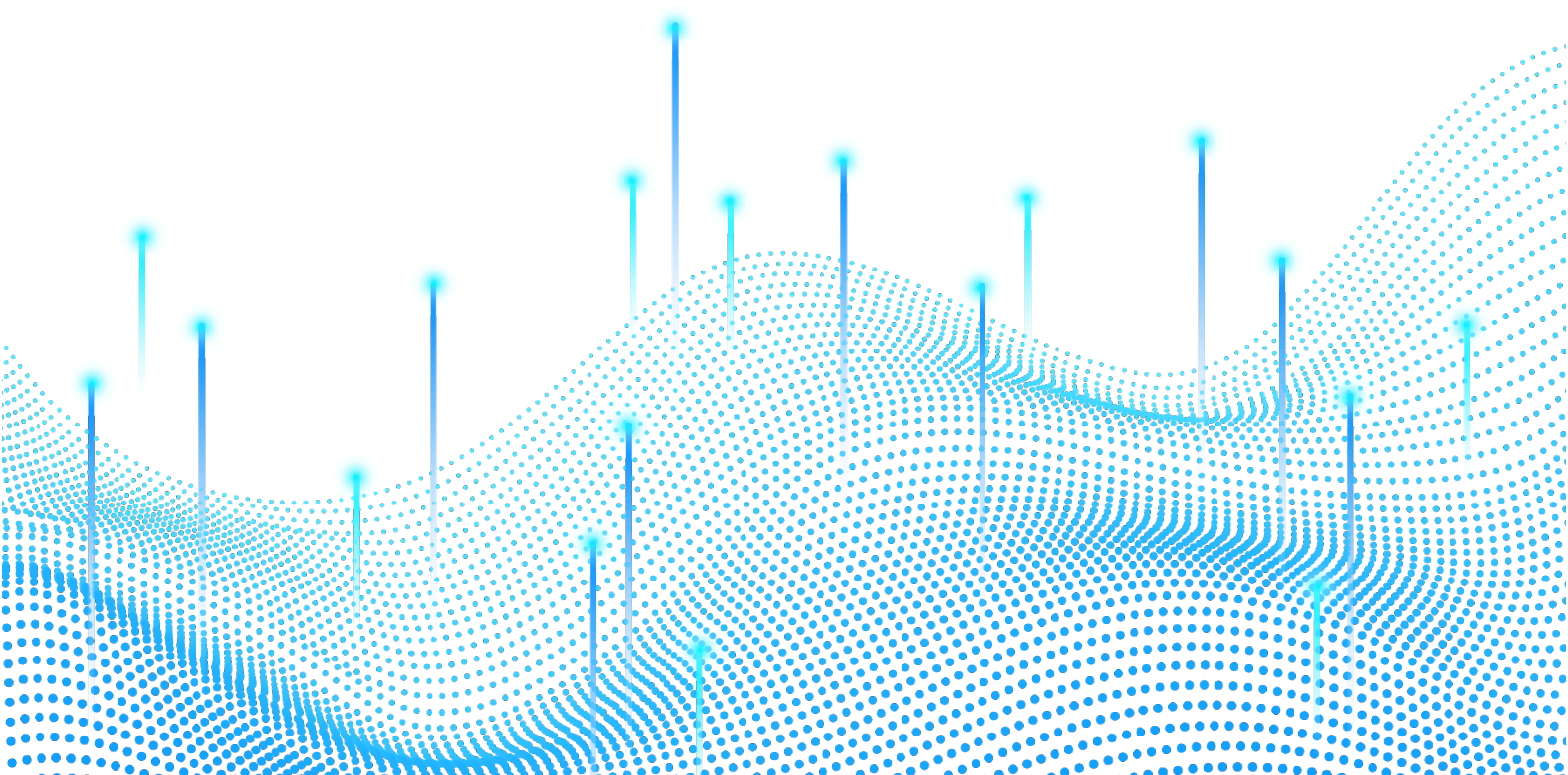

基本参数

BASIC PARAMETERS



双耳 Binaural

● 5118L (低增益)

最大输出	Maximum Output	$\leq 109+3\text{dB SPL}$
平均输出	Average Output	$107\pm 4\text{dB SPL}$
峰值增益	Peak Gain	$42\pm 5\text{dB}$
平均增益	Average Gain	$36\pm 5\text{dB}$
频率范围	Frequency Range	$\leq 400\text{Hz}\sim\geq 5000\text{Hz}$
总谐波失真	Total Harmonic Distortion	$\leq 2\%$
等效输入噪声	Equivalent Input Noise	$\leq 15\text{dB}$
工作电流	Working Current	$\leq 2\text{mA}@3.7\text{V}$



单耳 Single ear

● 5118H (高增益)


最大输出	Maximum Output	$\leq 114+3\text{dB SPL}$
平均输出	Average Output	$112\pm 4\text{dB SPL}$
峰值增益	Peak Gain	$50\pm 5\text{dB}$
平均增益	Average Gain	$45\pm 5\text{dB}$
频率范围	Frequency Range	$\leq 400\text{Hz}\sim\geq 5000\text{Hz}$
总谐波失真	Total Harmonic Distortion	$\leq 2\%$
等效输入噪声	Equivalent Input Noise	$\leq 15\text{dB}$
工作电流	Working Current	$\leq 2\text{mA}@3.7\text{V}$

WDRC通道数	Number of WDRC channels	16
电池类型	Battery Type	锂电池 Lithium Battery
麦克风类型	Microphone Type	硅麦 Silicon Microphone
喇叭类型	Speaker Type	动铁 Dynamic Iron Speaker
充电接口	Charging Port	TYPE- C


增益调节

GAIN ADJUSTMENT

(1) 增益曲线 Gain Curve

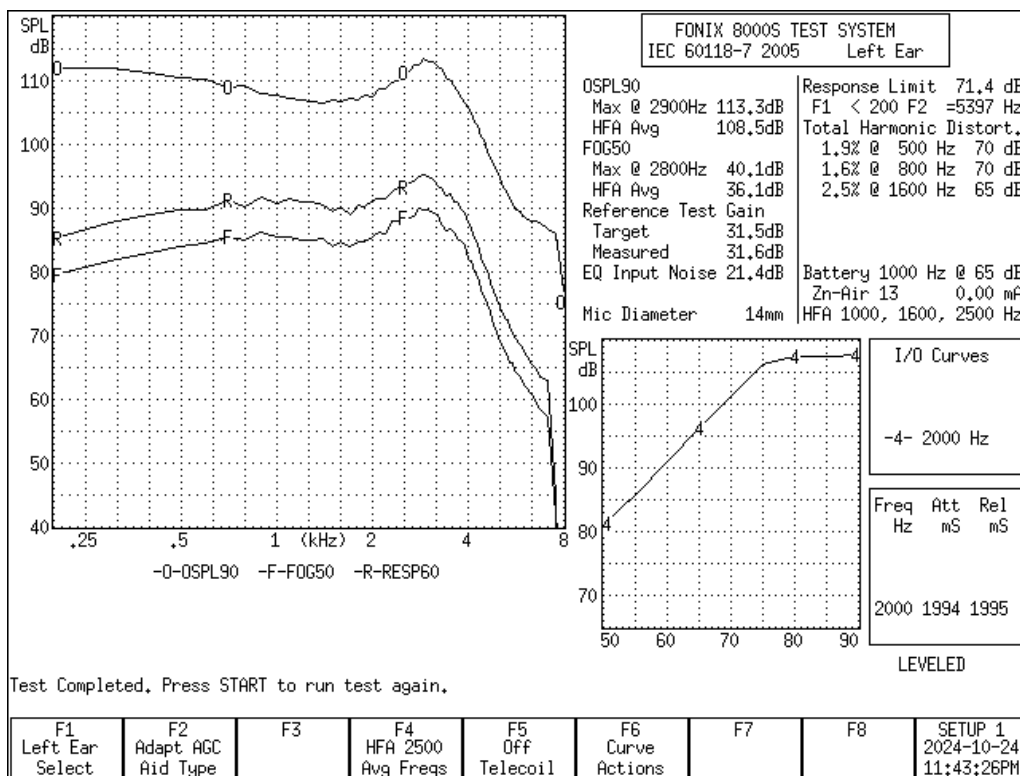

5118L低增益 Low Gain

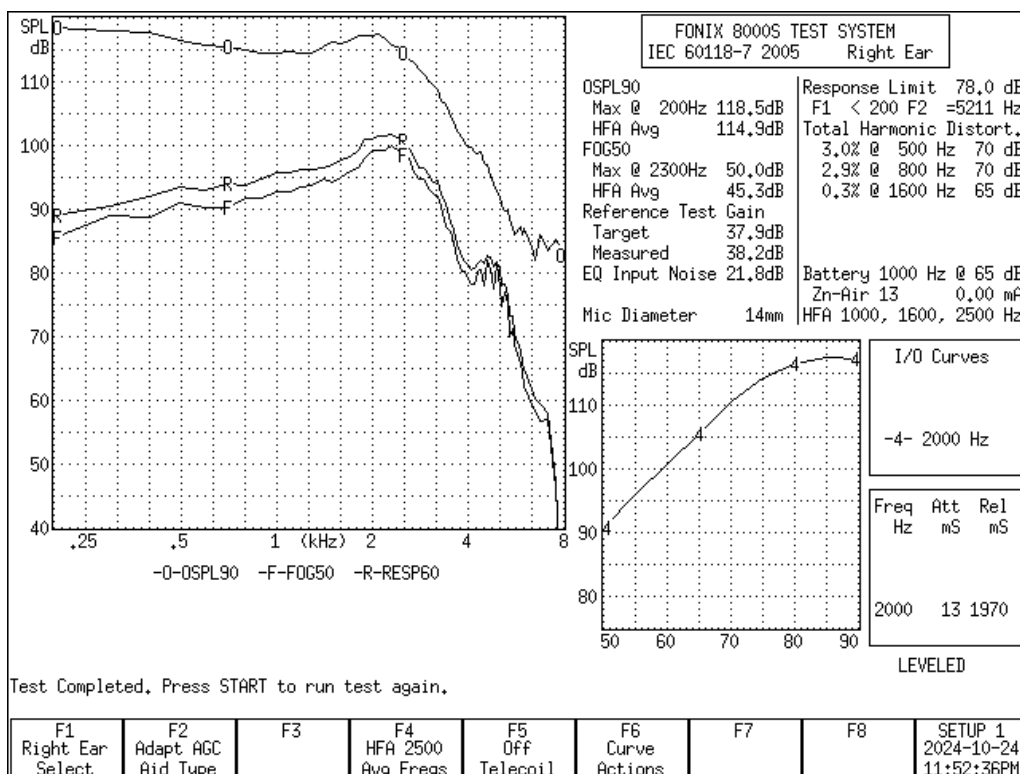

5118H高增益 High Gain

(2) 增益调节范围 Gain Adjustment Range

5118L: 21dB ~ 36dB

5118L	1档 Level 1	2档 Level 2	3档 Level 3	4档 Level 4	5档 Level 5	6档 Level 6
	21dB	24dB	27dB	30dB	33dB	36dB

(2) 增益调节范围 Gain Adjustment Range


5118H: 30dB ~ 45dB

5118H	1档 Level 1	2档 Level 2	3档 Level 3	4档 Level 4	5档 Level 5	6档 Level 6
	30dB	33dB	36dB	39dB	42dB	45dB


(3) 覆盖的听损范围 Hearing Loss Range Covered

5118L: 轻度、中度、中重度
(Mild, Moderate, Moderate to Severe)

听阈/dB

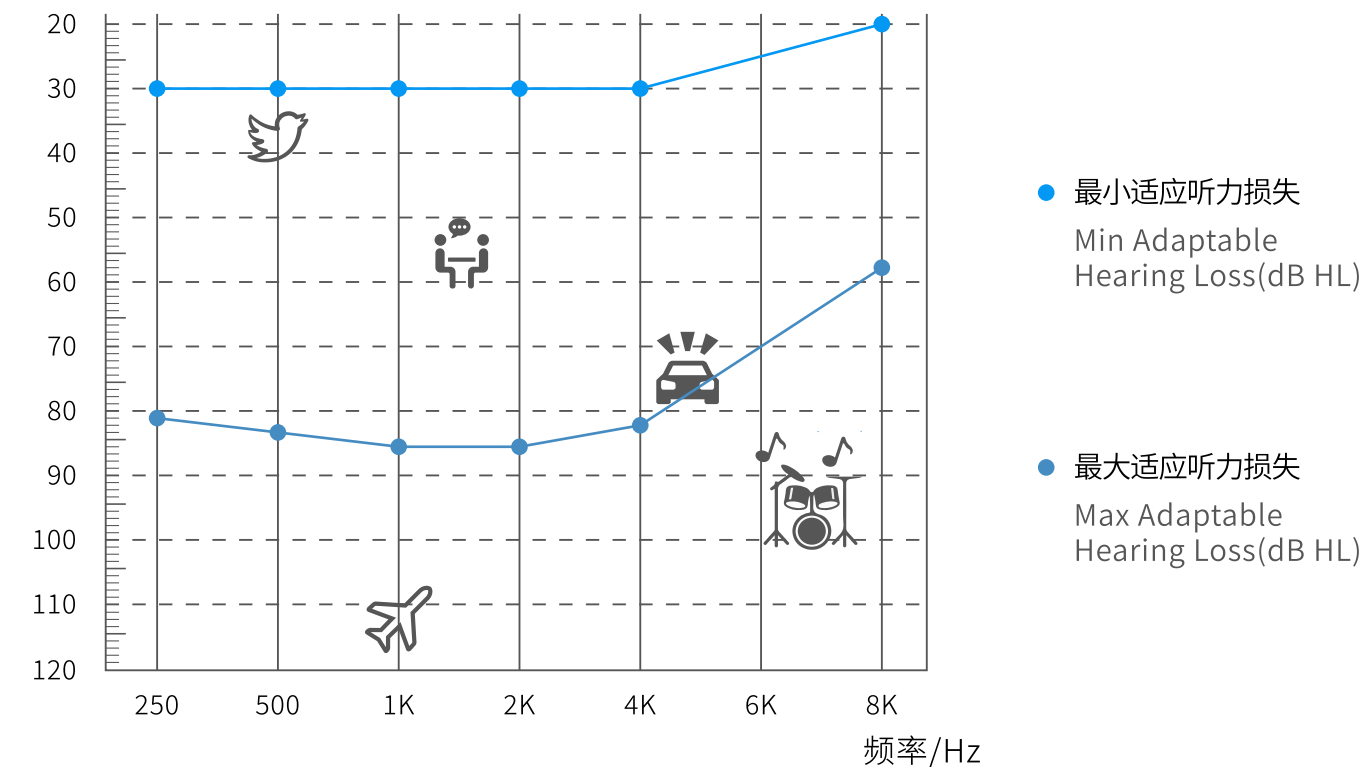

5118H: 轻度、中度、中重度、重度
(Mild, Moderate, Moderately Severe, Severe)

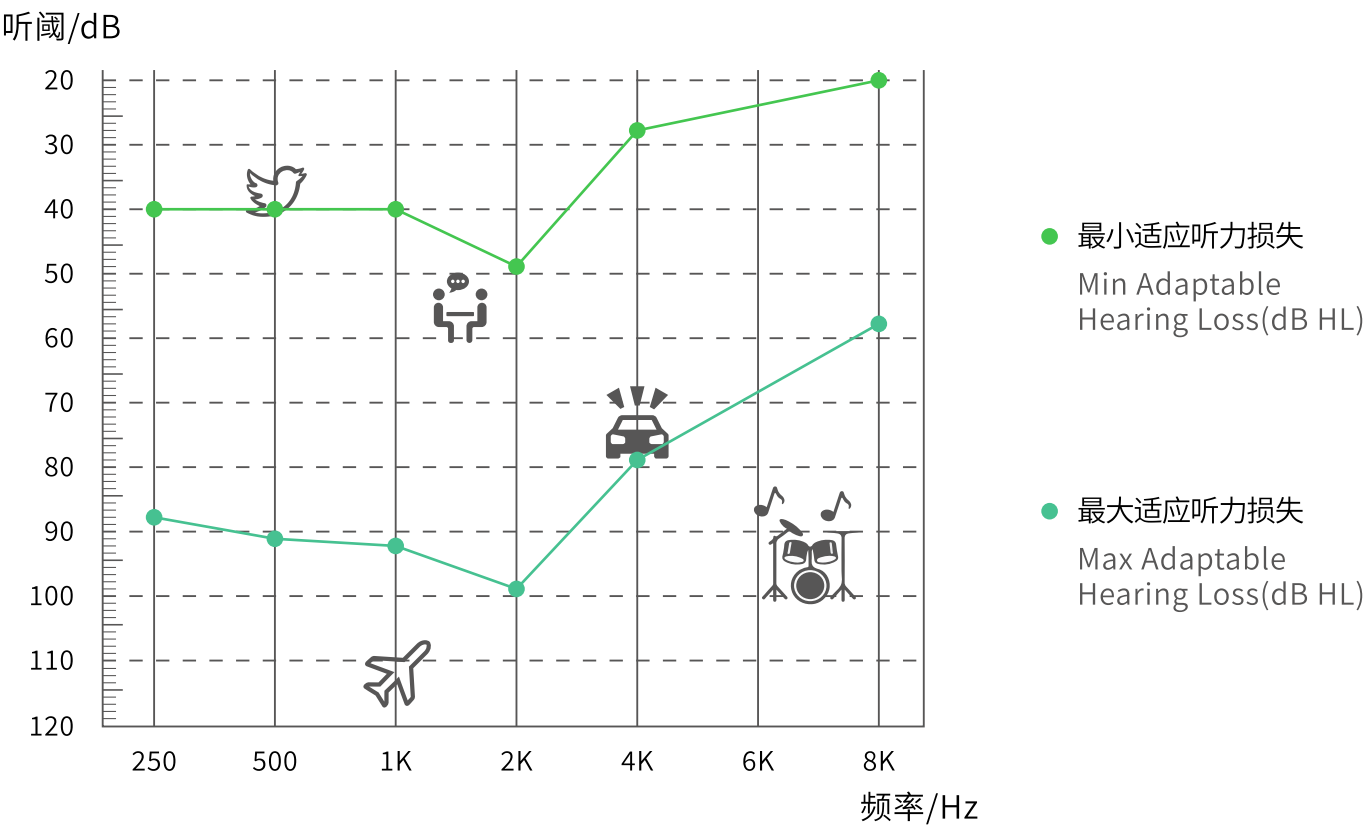

 鸟叫声 Birdsong 30~40dB

 正常交流声 Conversation sound 50~60dB

 汽车鸣笛 Car horn sound 70~80dB

功能介绍

FUNCTION INTRODUCTION

(1) 蓝牙信息 Bluetooth Information

类型 Type: BLE 版本 Version: V5.3

(2) 操作说明 Instructions

	开机 Power on	关机 Power off	加音量 Volume up
	下键短按1秒 Press the down button for 1 second	下键长按6秒 Press and hold the down button for 6 seconds	上键短按1秒 Press the up button for 1 second
	减音量 Volume down	切换蓝牙/助听 Switch Bluetooth/ hearing	切换助听模式 Switch hearing aid mode
	下键短按1秒 Press the down button for 1 second	下键长按3秒 Press and hold the down button for 3 seconds	上键长按3秒 Press and hold the up button for 3 seconds


(3) 续航 Battery life

 助听模式 Hearing mode 单次 Single: 15Hrs 综合 Comprehensive: 52Hrs	
 蓝牙模式 Bluetooth mode 单次 Single: 6Hrs 综合 Comprehensive: 21Hrs	
双耳 Binaural 充电盒电池容量 Charging case battery capacity: 420mAh	
单耳 Single Ear 充电盒电池容量 Charging case battery capacity: 300mAh	
助听器电池容量 Hearing aid battery capacity: 30mAh	
充电时间 Charging time: 2Hrs	可充电次数 Recycle charging: 3 Times

(4) APP验配 APP Fitting

- FIG6 验配公式 FIG6 Fitting Formula
- 4个模式操控调节 (通用、室内、户外、耳鸣掩蔽) 4 mode control adjustment (General, Indoor, Outdoor, Tinnitus Masking)
- 音量调节：左耳调节、右耳调节、左右耳同步调节 Volume adjustment: left ear adjustment, right ear adjustment, left and right ear synchronous adjustment
- 支持电量百分比查看 Support battery percentage viewing
- 用户可以调整大声、小声、低音和高音的音调 (32 频段) The user can adjust the tone of louder, softer, bass, and treble. (32 band)

FIG 6 国际验配公式
采用门店验配师大量使用的FIG 6验配公式
进行目标曲线的验配, 达到线下专业级要求

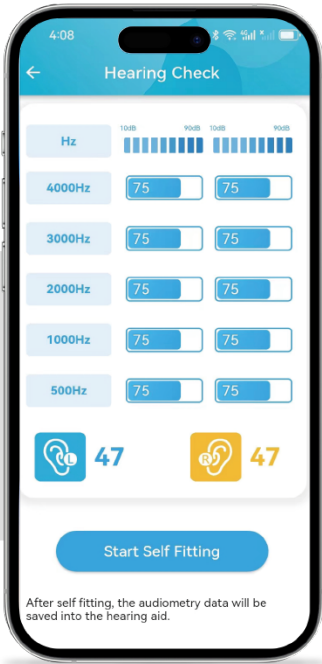

(5) 芯片介绍 Chip Introduction

Onsemi 进口专业级助听器芯片 Imported Professional-grade Hearing Aid Chips

• 自适应宽动态范围压缩算法 Adaptive wide dynamic range compression algorithm	
• 噪声抑制算法 Noise suppression algorithm	• 声反馈抑制算法 Noise suppression algorithm
• 瞬态强声阻断 Transient sound blocking	• 风噪声抑制 Wind noise suppression
• 自适应方向性麦克风 Adaptive directional microphone	• 音量学习 Volume Learning
• 耳鸣掩蔽 Tinnitus Masking	• 数据记录 Data Recording
• 自适应级别管理 Adaptive Level Management	• 实时分析演示 Real-time analysis demo

可选颜色

COLOR SELECTION

双耳 Binaural



● 白+肤 White+Skin color



● 黑+银灰 Black+Silver Gray

单耳 Single ear



● 白+肤 White+Skin color



● 白+银灰 White+Silver Gray


更多颜色持续解锁中...

More colors are being unlocked

尺寸与重量


SIZE AND WEIGHT

双耳 Binaural

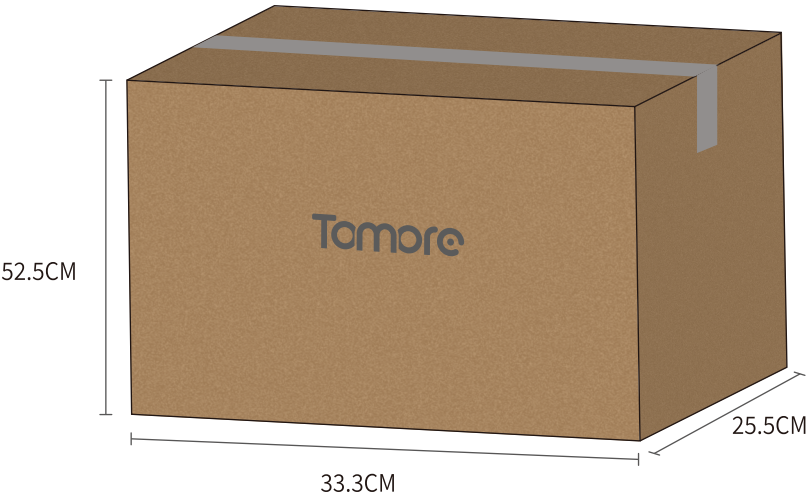

	长 Length	宽 Width	高 Height	重量 Weight	50台/箱 Pcs/ctn
助听器 Hearing aids	45MM	8.5MM	12.7MM	4.3G	
充电盒 Chging case	48MM	80MM	35MM	68.3G	
包装盒 Packaging box	160MM	100MM	46MM	275G	
外箱 Outer Box	52.5CM	33.3CM	25.5CM	13KG	

单耳Single ear

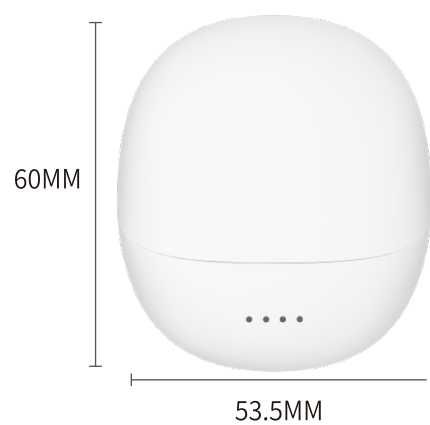

	长 Length	宽 Width	高 Height	重量 Weight	72台/箱 Pcs/ctn
助听器 Hearing aids	45MM	8.5MM	12.7MM	4.3G	
充电盒 Chging case	48MM	80MM	35MM	35.5G	
包装盒 Packaging box	160MM	100MM	46MM	170G	
外箱 Outer Box	52.5CM	33.3CM	25.5CM	12KG	